


FLOCARE® G-TUBE

**Udskiftelig gastrostomi-
sonde til indgivelse af
sondeernæring og væske
direkte i ventriklen.**

Flocare® G-tube er en robust gastrostomisonde, som er lavet af vævsvenlig silikone. Den er brugervenlig og let at vedligeholde. **Flocare® G-tube** tilsluttes direkte til enteralt ernæringssæt eller ernæringssprøjte til let administration af sondeernæring, væske eller medicin.

Den klare polyurethan-sonde gør det nemt at se, om sonden er skyllet efter brug. Den klare, udvendige fikseringsplade i silikone gør det let at tilse stomien.

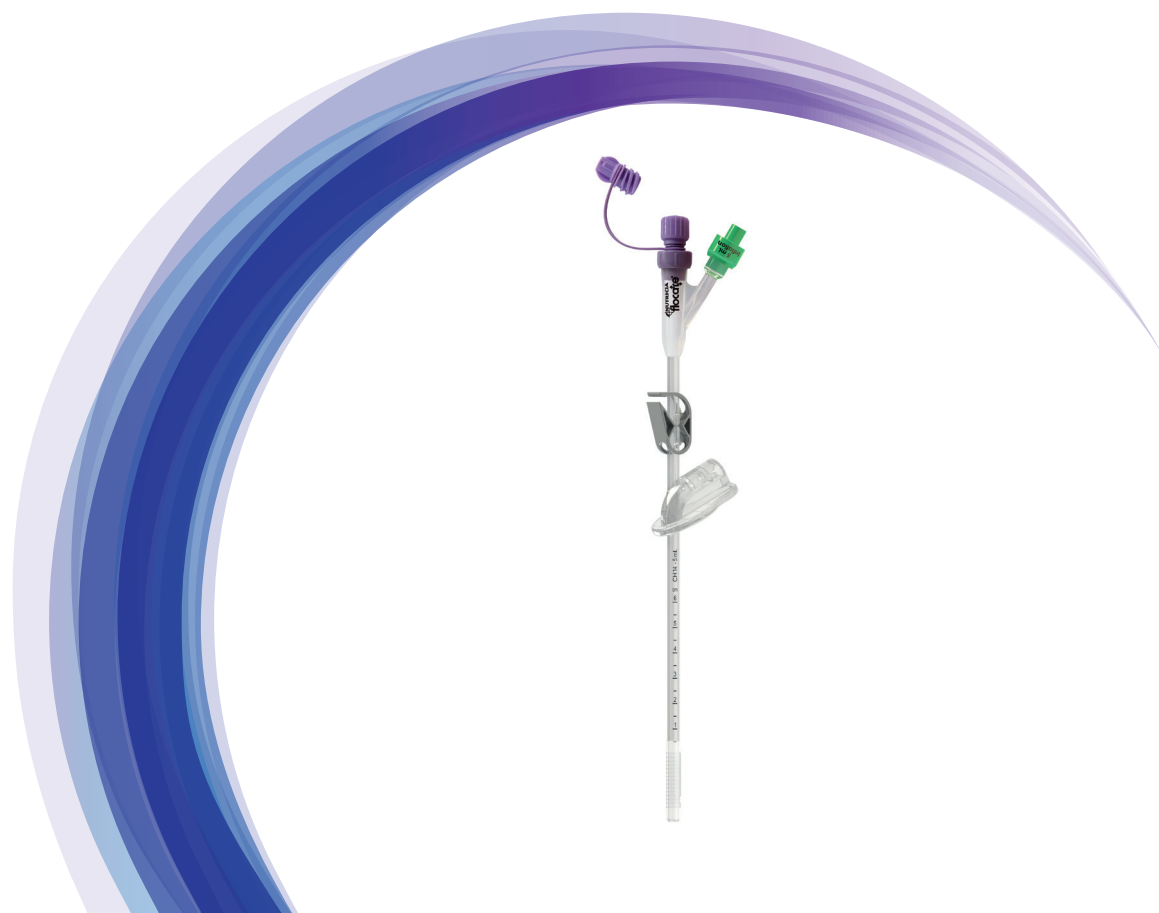

FLOCARE® G-TUBE:

Består af

- A: Klar silikonesonde 23 cm lang
- Ch størrelse er trykt på sonden
 - Afstandsmærker trykt i centimeter fra ballonen og fremefter
- B: Indvendig fikseringsballon af silikone
- C: Udvendig fikseringsplade af klar silikone
- D: Injektionsventil til indvendig ballon med farvekode
- E: Ernæringskonnektor med fastmonteret hætte

Størrelse

Ch 10, 14, 16, 18, 20.

Indikation

Langvarig sondeernæring efter at stomi er oprettet.

Kontraindikationer

Stomikanalen er ikke helet. Infektion i stomien, ascites, gastroparese.

Tilbehør

Udskiftelig ernæringskonnektor. Ekstern fikseringsplade.

Holdbarhed

60 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato på pakningen.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur.

Brugstid

Ca. 3-6 mdr. Brugstiden er vanskelig at angive, da den kan variere meget afhængigt af bl.a. mængden af mavesyre, medicinering og sondemaden.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

FLOCARE® G-tuber opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.



VAREINFORMATION

Produktnavn	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® G-tube Ch 10 – hvid (Ballonindhold: 3 ml)	594814	2 stk.
Flocare® G-tube Ch 14 – grøn (Ballonindhold: 5 ml)	594815	2 stk.
Flocare® G-tube Ch 16 – orange (Ballonindhold 10 ml)	594816	2 stk.
Flocare® G-tube Ch 18 – rød (Ballonindhold 15 ml)	594817	2 stk.
Flocare® G-tube Ch 20 – gul (Ballonindhold 15 ml)	594818	2 stk.