

FLOCARE® GRAVITY ERNÆRINGSSÆT

Engangs enteralt ernæringsæt til brug uden pumpe. Uden DEHP og andre phthalater.

De forskellige **Flocare® Gravity™** ernæringsæt er beregnet til tilkobling af sondeernæring til nasalsonder, PEG-sonder eller til forlængerslanger til gastrostomi knapsonder, når indgivelse af sondeernæring sker uden brug af pumpe. Den lilla farve signalerer en tydelig forskel fra administrationsæt til parenteral brug.

Flocare® Pack set Gravity™

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack (pose).

Flocare® Universal set Gravity™

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i plastic- og glasflaske.





Flocare® Pack set
Gravity™

Flocare® Universal set
Gravity™

VAREINFORMATION

	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® Pack set Gravity™	586460	30 stk.
Flocare® Universal set Gravity™	590070	30 stk.

FLOCARE® GRAVITY™ ERNÆRINGSSÆT:

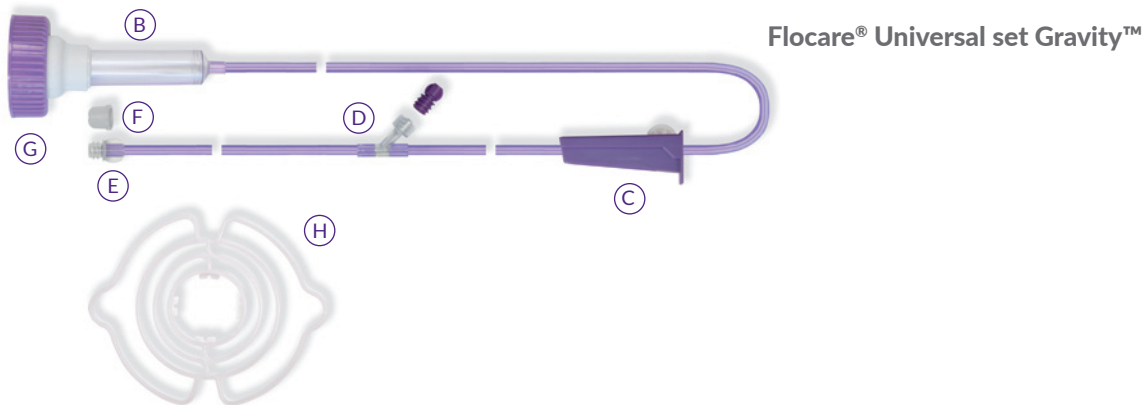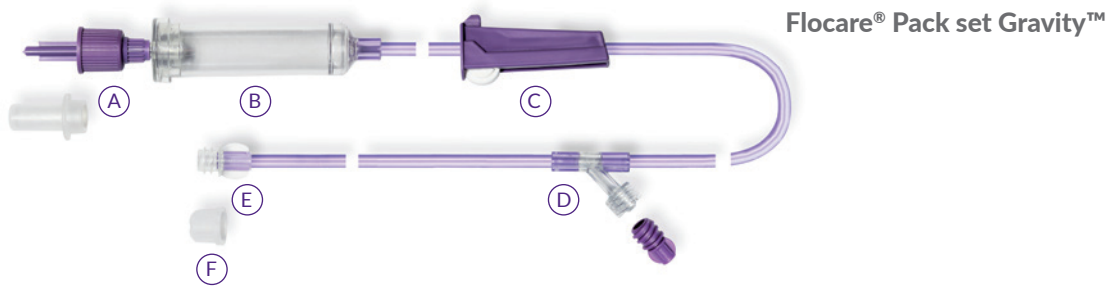

- Består af:**
- A: Plusformet ENPlus Cross Spike
 - B: Dråbekammer
 - C: Rulleklemme
 - D: Y-kobling til indgivelse af medicin og gennemskylning (med hætte)
 - E: Hun luer-lock konektor
 - F: ENFit han konektor (ikke IV kompatibel) med støvhætte
 - G: Flaske konektor til glas og sutteflasker (følger med universal sæt)
 - H: Flaskeophæng (følger med universal sæt)

- Varianter:** Pack sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack (pose).
Universal sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondernæring i plastic- og glasflaske.

Materiale: PVC-godkendt til medicinsk brug, fri for phthalater.

Emballage: Enkeltvis sterilt pakket.

Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på pakningen.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur.

Brugstid: 24 timer.

Se også www.nutriciaflocare.com som giver information, råd og vejledning om Flocare Infinity pumpen samt interaktiv undervisning i brugen af pumpen.

FLOCARE® GRAVITY ernæringssæt opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.