

# FLOCARE® GRAVITY ERNÆRINGSSÆT

**Engangs enteralt ernæringsset til brug uden pumpe. Uden DEHP og andre phthalater.**

De forskellige **Flocare® Gravity™** ernæringsset er beregnet til tilkobling af sondeernæring til nasalsonder, PEG-sonder eller til forlængerslanger til gastrostomi knapsonder, når indgivelse af sondeernæring sker uden brug af pumpe. Den lilla farve signalerer en tydelig forskel fra administrationsset til parenteral brug.

#### **Flocare® Pack set Gravity™**

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack (pose).

#### **Flocare® Universal set Gravity™**

for tilkobling af både Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i plastic- og glasflaske.





Flocare® Pack set  
Gravity™

Flocare® Universal set  
Gravity™

## VAREINFORMATION

	Nutricia varenr.	Salgsenhed
Flocare® Pack set Gravity™	86460	30 stk.
Flocare® Universal set Gravity™	90070	30 stk.

## FLOCARE® GRAVITY™ ERNÆRINGSSÆT:

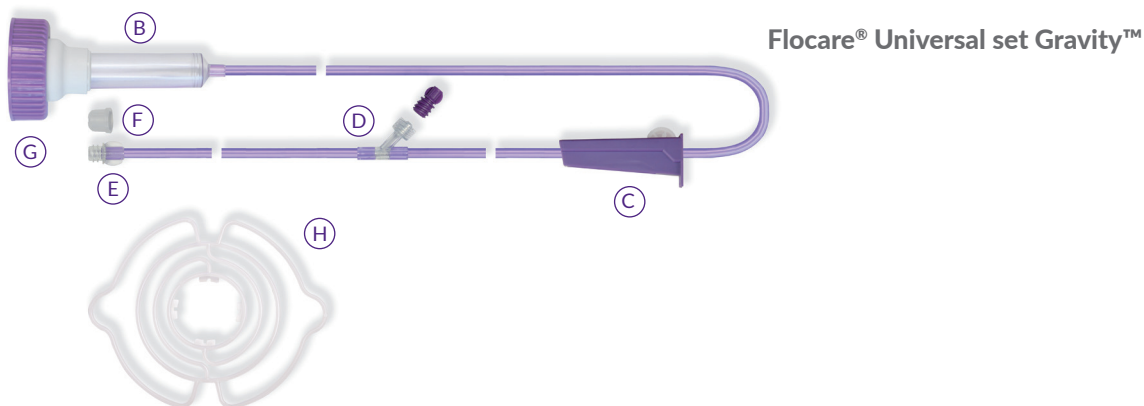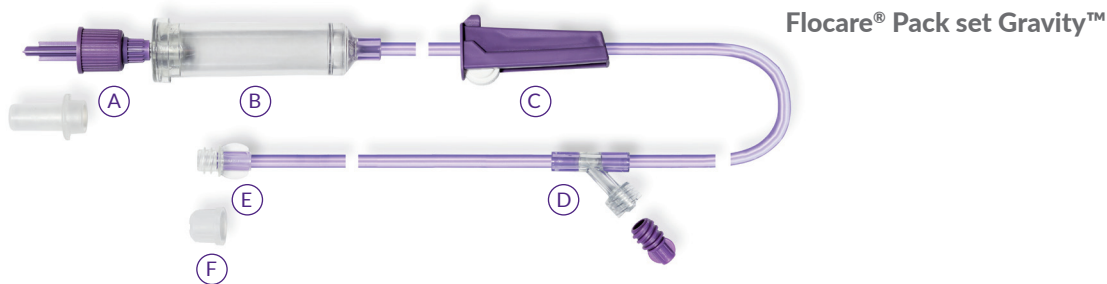

- Består af:**
- A: Plusformet ENPlus Cross Spike
  - B: Dråbekammer
  - C: Rulleklemme
  - D: Y-kobling til indgivelse af medicin og gennemskylning (med hætte)
  - E: Hun luer-lock konektor
  - F: ENFit han konektor (ikke IV kompatibel) med støvhætte
  - G: Flaske konektor til glas og sutteflasker (følger med universal sæt)
  - H: Flaskeophæng (følger med universal sæt)

- Varianter:** Pack sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring i Pack (pose).  
Universal sæt til brug med Nutricias og andre leverandørers sondernæring i plastic- og glasflaske.

**Materiale:** PVC-godkendt til medicinsk brug, fri for phthalater.

**Emballage:** Enkeltvis sterilt pakket.

**Holdbarhed:** 36 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato fremgår af mærkning på pakningen.

**Opbevaring:** Opbevares ved stuetemperatur.

**Brugstid:** 24 timer.

Se også [www.nutriciaflocare.com](http://www.nutriciaflocare.com) som giver information, råd og vejledning om Flocare Infinity pumpen samt interaktiv undervisning i brugen af pumpen.

FLOCARE® GRAVITY ernæringssæt opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.